

# COMPRINET® FORTE

SOLIDNA OCHRONA  
KOMPRESJOTERAPII O ZMIENNYM UCISKU



MEDYCZNE WYROBY KOMPRESYJNE  
W LECZNIU FLEBOLOGICZNYM, LIMFOLOGICZNYM I ORTOPEDYCZNYM

# COMPRINET® FORTE

## SOLIDNA OCHRONA KOMPRESJOTERAPII O ZMIENNYM UCISKU

### COMPRINET® FORTE

- Kompresjoterapia po zabiegach chirurgii naczyniowej
- Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich u pacjentów wysokiego ryzyka
- Redukcja obrzęków po operacjach ortopedycznych
- Alternatywa dla bandaży kompresyjnych
  - Bezpieczne z uwagi na stopniowalność kompresji (ciśnienie zmniejsza się od kostki do pachwiny)
  - Szybka i łatwa aplikacja
  - Oszczędność czasu – wyroby mogą pozostać kilka dni
  - Duży komfort noszenia - akceptowane przez większość pacjentów

WSKAZANIA		PRZECIWWSKAZANIA
<b>Comprinet® forte 35*</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Po operacji żylaków</li><li>• Po skleroterapii</li><li>• Leczenie żylaków, obrzęków i refluksu żylnego</li><li>• Widoczne choroby żył (zamiast bandaży)</li><li>• Po złamaniach i w chirurgii rekonstrukcji kości</li><li>• Zapobieganie zastoju żylnego</li><li>• Pooperacyjne leczenie zakrzepicy</li></ul>	<b>Comprinet® forte 23*</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Przed-, śród- i pooperacyjna profilaktyka zakrzepicy u unieruchomionych i mobilnych pacjentów wysokiego ryzyka zakrzepicy żył głębokich</li><li>• Leczenie obrzęku (pooperacyjnego i hydrostatycznego)</li><li>• Łagodne żylaki</li><li>• Kontynuacja leczenia zakrzepicy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niedokrwienie (zaawansowana choroba tętnic)</li><li>• Niekontrolowana zastoinowa niewydolność serca</li><li>• Nielezione septyczne zapalenie żył</li><li>• Siniczny obrzęk bolesny</li></ul>

\*Nominalna wartość ciśnienia dla przeciętnego obwodu kostki.


### CZAS TRWANIA APLIKACJI

Zgodnie z zaleceniami lekarza i zależnie od obszaru aplikacji Comprinet® forte może być noszony od jednego do kilku dni, w ciągu dnia i nocy. Produkt może być stosowany zarówno u pacjentów mobilnych jak i unieruchomionych (leżących).

### NIEZAWODNA OCHRONA

- Ułatwia powrót krwi żyłnej do serca
- Redukuje/zapobiega obrzękom i krwiakom

### ... ZE WZGLĘDU NA STOPNIOWALNOŚĆ UCISKU

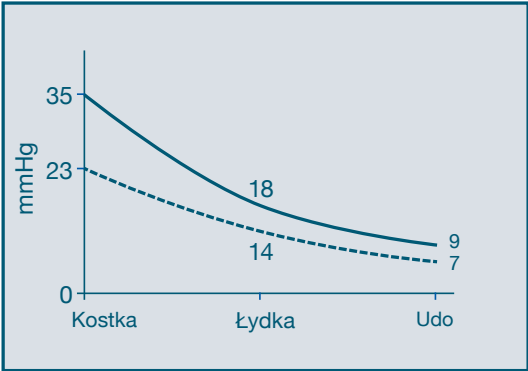

- Spadek ciśnienia od części dystalnych do proksymalnych
- Gwarantowany nawet w przypadku problematycznych kształtów nóg z powodu wzdłużnej i poprzecznej rozciągliwości dzianiny
- Anatomiczne dopasowanie pięty i zapobiegające zsuwaniu się wykończenie góry pończoch



### ...I SZYBKIE, ŁATWE ZARZĄDZANIE



- Szybka, łatwa i dokładna identyfikacja rozmiaru dzięki kolorowym oznaczeniom na pięcie
- Numeryczne oznaczenia kompresji (23/35) na grzbiecie stopy dla szybkiej identyfikacji
- Prosta i wygodna ocena krążenia krwi z powodu odkrytych palców
- Wysoka efektywność ekonomiczna - zaledwie 4 rozmiary pasują niemal do wszystkich kończyn



ROZMIAR	OBWÓD NAD KOSTKĄ W CM	OBWÓD ŁYDKI W CM	OBWÓD UDA W CM	KOLOR OZNACZENIA	NR KATALOGOWY COMPRINET® FORTE 35	NR KATALOGOWY COMPRINET® FORTE 23
1	18–21	24–34	39–74		7509100	7508700
2	21–24	30–40	45–80		7509200	7508800
3	24–27	36–46	50–86		7509300	7508900
4	27–30	42–52	50–90		7509400	7509000

# COMPRINET® FORTE

## SOLIDNA OCHRONA KOMPRESJOTERAPII O ZMIENNYM UCISKU

### ZWIĘKSZONY KOMFORT PACJENTA

- Przyjazna dla skóry, miękka i przepuszczająca powietrze dzianina
- Minimalne ryzyko alergii (bez lateksu)
- Stabilne utrzymywanie się wyrobu z uwagi na anatomiczne dopasowanie i profilowaną piętę
- Miękkie, antypoślizgowe wykończenie uda zapobiegające przesuwaniu się wyrobu podczas ruchu



### IDEALNY DODATEK COMPRINET® FORTE LINER

Dla mocowania opatrunków po zabiegach chirurgicznych (np. po stripingu czy skleroterapii)

- Ułatwia bezpieczne zakładanie pończoch Comprinet® forte poprzez bezpieczne mocowanie opatrunków
- Wysoka elastyczność - uniwersalny rozmiar
- Przepuszczający powietrze
- Zakryte palce
- Wzmocniona część na palcach - większa trwałość



#### SKŁAD

##### Comprinet® forte 35

- 79% poliamid
- 18% elastan
- 3% neopren

##### Comprinet® forte 23

- 83% poliamid
- 14% elastan
- 3% neopren

##### Liner

- 100% poliamid

WSZYSTKIE PRODUKTY  
NIE ZAWIERAJĄ LATEKSU

**LATEX**  
**FREE**  
FORMULA

### MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO UŻYCIA

#### • Efektywność ekonomiczna

- Mogą być prane do 10 razy bez utraty kompresji; maksymalna temperatura prania 90°C (194°F); maksymalna temperatura suszenia 95°C (203°F)]
- Utrzymują prawidłowe ciśnienia po 10 praniach - potwierdzone przez Instytut Hohenstein
- Liczba prai może być kontrolowana poprzez skanowanie kodu kreskowego lub poprzez wykorzystanie odpowiedniego pola na metce



### PRAWIDŁOWY POMIAR

Prawidłowy pomiar dla doboru rozmiaru pończoch Comprinet® forte jest niezbędny dla zapewnienia optymalnej, medycznej skuteczności.

1. Najpierw zmierz obwód kostki

Następnie sprawdź prawidłowy dobór rozmiaru poprzez

2. Zmierzenie obwodu łydki w najszerszym miejscu

3. Zmierzenie obwodu uda w połowie wysokości.



1. Obwód nad kostką



2. Obwód łydki



3. Obwód uda



# COMPRINET® FORTE

## SOLIDNA OCHRONA KOMPRESJOTERAPII O ZMIENNYM UCISKU

### Jak wkładać pończochy?

Comprinet® forte powinno się wkładać następująco:



1. Naciągnij pończochę na ramię i chwyć palcami piętę od wewnątrz.



2. Wyciągnij pończochę trzymając piętę.



3. Wciągnij pończochę na stopę aż do pięty pozostawiając pozostałą część pończochy nadal wyciągniętą.



4. Pociągnij pończochę tak wysoko jak to jest możliwe, na łydkę.



5. Włóż dwa palce pomiędzy złożony materiał i przesunij w kierunku pięty.



6. Zroluj pończochę i ponownie naciągnij ją na łydkę.



7. Delikatnie skoryguj ułożenie pończochy, tak, by pięta była dokładnie na właściwym miejscu.



8. Powoli i ostrożnie przesuwaj pończochę w kierunku uda, przesuwając ją w ten sposób, że kciuki są od wewnątrz.



9. Upewnij się, że nie ma zmarszczeń materiału na stopie i palcach.



10. Skontroluj ułożenie całej pończochy i wygładź wykończenie podtrzymujące kciukami łożnymi od wewnątrz.

### UWAGA:

Upewnij się, że skóra pacjenta jest sucha. Nakładanie wyrobu na wilgotną skórę jest trudniejsze.

### KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA KOMPRESJOTERAPII

#### COMPRINET® PRO - POŃCZOCHY PRZECIWZAKRZEPOWE

- Dla pacjentów wymagających długotrwałego unieruchomienia (przedoperacyjnie, śródoperacyjnie i pooperacyjnie), dla kobiet w ciąży, które mają zalecenie pozostania w łóżku, dla starszych, obłożnie chorych pacjentów, chorych na raka, a także po operacji żyłaków na nogę, która nie została poddana zabiegowi.
- Stopniowa redukcja ciśnienia od 18 mmHg w okolicy kostki do 8 mmHg w okolicy pachwiny.
- Anatomicznie dopasowanie wyrobu i wysoki komfort noszenia.



#### ELOFLEX® LYCRA BANDAŻE KOMPRESYJNE

- Dla pacjentów o nietypowym kształcie nóg
- Bandaż o średniej rozciągliwości (medium stretch) - 120-130% rozciągliwości
- Wysoka rozciągliwość ułatwia aplikację
- Przyjazne dla skóry i przepuszczające powietrze



#### JOBST® MEDYCZNE WYROBY POŃCZOSZNICZE

- Kompresja prawidłowa do 6 miesięcy:  
JOBST® *UltraSheer*, JOBST® *Opaque*, JOBST® *forMen*, JOBST® *Classic*,  
JOBST® *Bellavar*®, JOBST® *Elvarex*®
- Do leczenia ambulatoryjnego
- Dostępne w rozmiarach standardowych i na miarę
- Szeroki asortyment modeli i kolorów

*UltraSheer*



*Opaque*



*forMen*



*Classic*



*Bellavar*®



*Elvarex*®



# COMPRINET® FORTE

## SOLIDNA OCHRONA KOMPRESJOTERAPII O ZMIENNYM UCISKU

### PRZEGLĄD ASORTYMENTU - KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA KOMPRESJOTERAPII

#### Comprinet® forte 35 Medyczne pończochy kompresyjne dla terapii flebologicznej, ortopedycznej, limfologicznej, 35 mmHg\*, niesterylne

Nr katalogowy	Rozmiar	Obwody w cm			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
		Kostka	Łydka	Udo		
7509100	1	18–21	24–34	39–74	1 sztuka	40 sztuk
7509200	2	21–24	30–40	45–80	1 sztuka	40 sztuk
7509300	3	24–27	36–46	50–86	1 sztuka	40 sztuk
7509400	4	27–30	42–52	50–90	1 sztuka	40 sztuk

#### Comprinet® forte 23 Medyczne pończochy kompresyjne dla terapii flebologicznej, ortopedycznej, limfologicznej, 23 mmHg\*, niesterylne

Nr katalogowy	Rozmiar	Obwody w cm			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
		Kostka	Łydka	Udo		
7508700	1	18–21	24–34	39–74	1 para	40 sztuk
7508800	2	21–24	30–40	45–80	1 para	40 sztuk
7508900	3	24–27	36–46	50–86	1 para	40 sztuk
7509000	4	27–30	42–52	50–90	1 para	40 sztuk

#### Comprinet® forte Liner Pończochy, niesterylne

Nr katalogowy	Rozmiar	Obwód uda	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
7508600	Jeden rozmiar uniwersalny	Maksymalnie do 90 cm	20 sztuk	100 sztuk

#### Comprinet® pro Przeciwzakrzepowe pończochy dla profilaktyki zakrzepicy żył głębokich, 18 mmHg\*

Nr katalogowy	Rozmiar	Obwód łydki w cm	Długość w cm	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
4633500	1	23–30	64–80	1 para	40 sztuk
4633600	2	23–30	80–97	1 para	40 sztuk
4633700	3	30–38	64–80	1 para	40 sztuk
4833800	4	30–38	80–97	1 para	40 sztuk
4638800	5	38–46	64–80	1 para	40 sztuk
4638900	6	38–46	80–97	1 para	40 sztuk
7712500	7	46–53	64–80	1 para	40 sztuk
7712800	8	46–53	80–97	1 para	40 sztuk

#### Comprinet® pro Przeciwzakrzepowe podkolanówki dla profilaktyki zakrzepicy żył głębokich, 18 mmHg\*

Nr katalogowy	Rozmiar	Obwód łydki w cm	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
7702600	1	23–30	1 para	40 sztuk
7702700	2	30–38	1 para	40 sztuk
7702800	3	38–46	1 para	40 sztuk
7712400	4	46–53	1 para	40 sztuk

#### Eloflex® Lycra Bandaż o średniej rozciągliwości

Nr katalogowy	Rozmiar	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
0238800	6 m × 8.0 cm	1 sztuka	250 sztuk
0239000	6 m × 10.0 cm	1 sztuka	210 sztuk
0239200	6 m × 12.0 cm	1 sztuka	180 sztuk

#### JOBST® Medyczne wyroby pończosznice Kompresja prawidłowa do 6 miesięcy

\*Nominalna wartość ciśnienia dla przeciętnego obwodu kostki.

Aby bezpiecznie korzystać w wyrobu, proszę zapoznać się z etykietą i/lub broszurą.